


## FIAB - SET DI INTRODUZIONE 'PEEL AWAY' STERILE

### FIAB - STERILE LEAD INTRODUCER SET PEEL AWAY

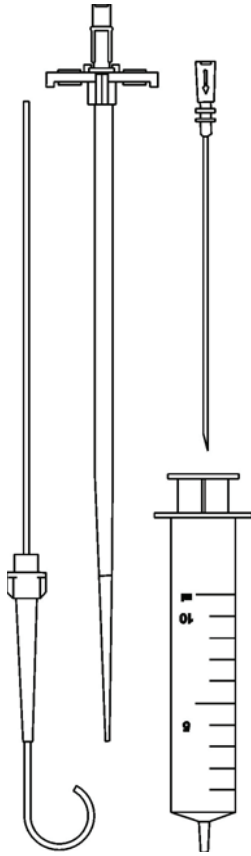

#### descrizione prodotto/product description

Set di introduzione per un facile posizionamento di elettrocateretri cardiaci stimolatori o cateteri attraverso la vena Succlavia con sistema di bloccaggio di sicurezza Dilatore/Cannula di tipo "interlocking hub".  
Dopo l'introduzione, la guaina può essere ritirata e strappata via dall'elettrodo, dividendola in due parti. (set di introduzione "Peel-Away").  
Il set di introduzione è sterile ed è disponibile in diverse misure (french). Il diametro dell'introduttore in french è riportato sulla testa del dilatatore ed è riconoscibile tramite il colore del terminale (hub) del dilatatore.

Il kit è conforme alla norma ISO11070 "Sterile single-use intravascular catheter introducers".

*Introducer Set for easy placement of pacing leads or catheters via the Subclavia vein with security lock system Dilator/Sheath (Interlocking Hub).*

*After introduction, the sheath can be pulled back and peeled off two parts. (introducer set "Peel-Away")*

*Supplied sterile and available in different french sizes. The French size is placed on the dilator hub and it is characterized from the color of the hub.*

*Introducer set comply the standard ISO11070 "Sterile single-use intravascular catheter introducers".*

#### Il Kit sterile contiene/ Sterile Set includes:

- un introduttore formato da un dilatatore in HDPE (+ 15% di solfato di bario) inserito in una guaina in PTFE (+ 9% di triossido di bismuto)
- un filo-guida Ø0.038", lunghezza 50cm, a doppio finale con punta a "J" (raggio 3mm) e punta dritta, in acciaio con filo interno di sicurezza. Il filo-guida è inserito in una guaina di materiale plastico che termina con una cannula raddrizzatrice per facilitare l'inserimento del terminale a 'J' dentro l'ago
- un ago cannula calibro 18G, lunghezza 7cm
- una siringa a stantuffo da 10 ml

i kit sono disponibili con componenti aggiuntivi. Informazioni aggiuntive nella tabella seguente:

*Kits are available with different additional components. More info in the following table:*

ACCESSORIO INCLUSO INCLUDED ACCESSORY	DIMENSIONI DEL CORPO BODY DIMENSION	7 French (2.39 mm) 13.5 cm	8 French (2.72 mm) 13.5 cm	9 French (3.05 mm) 13.5 cm	10 French (3.38 mm) 13.5 cm
F7244 <sup>(1)</sup> - Cauterico ad alta temperatura / High temperature cautery 		REF: <b>F47507/44</b>	REF: <b>F47508/44</b>	REF: <b>F47509/44</b>	REF: <b>F47510/44</b>
F7830S <sup>(1)</sup> - Cavetto soglia / Threshold cable 		REF: <b>F47507/30</b>	REF: <b>F47508/30</b>	REF: <b>F47509/30</b>	REF: <b>F47510/30</b>
F7833 <sup>(1)</sup> - Cavetto soglia / Threshold cable 		REF: <b>F47507/33</b>	REF: <b>F47508/33</b>	REF: <b>F47509/33</b>	REF: <b>F47510/33</b>

#### CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola, Blister in PE sigillato con Tyvek <i>Single, Blister made in PE sealed with Tyvek</i>
CONFEZIONE DI VENDITA - SALE PACKAGING	5 pezzi in scatola di cartone -5 pieces in carton box
STERILIZZAZIONE – STERILIZATION	Ossido di etilene ( ETO ) – ETO gas
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C+ +50°C – Umidità relativa:20%+80% <i>Temperature: 0°C+ +50°C – Relative Humidity: 20%+80%</i>
SCADENZA - EXPIRY	3 anni dalla data di sterilizzazione – 3 years from sterilisation date
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIa. Il kit è conforme alla norma ISO11070 "Sterile single-use intravascular catheter introducers". <i>Directive 93/42/EEC (D.L. 46/97). Class IIa device. Introducer set comply the standard ISO11070 "Sterile single-use intravascular catheter introducers".</i>

**(1) Schede tecniche degli accessori inclusi disponibili presso FIAB: F7244 cod. 52500020, F7830S cod. 52201144, F7833 cod. 52201158. Technical data sheets for accessories available at FIAB: F7244 cod. 52500020, F7830S cod. 52201144, F7833 cod. 52201158.**